



伊吹もぐさの老舗
創業明治28年

山正新聞

発行No: 第23-2号
発行月: 2005年7月
発行責任者
株式会社山正



Tel0749-74-0330
Fax0749-74-0466
E-mail
info@moxa.net
URL:
http://www.moxa.net

特撰 日本一黄金山

雪の華 発売中

昨年十二月、念願でありましたもぐさ工場を併設した新社屋建設が完成いたしました。もう一つの念願事が、もぐさ屋がもぐさ屋であることにこだわり、最高級のもぐさが作れる工場となったのです。弊社の最上級もぐさ「日本一黄金山」を更に精製を重ね、完成いたしました。特撰日本一黄金山「雪の華」。



雪の華
専用桐箱入り
30g

数量限定商品



第五十四回 全日本鍼灸学会開催

この「雪の華」は、弊社が創業明治二十八年以来百有余年頑なに守り続けております弊社のもぐさ製造法により製造しております点灸用最上級もぐさ「日本一黄金山」をさらに精製し、これ以上の精製はできないところまでおこなったものです。さらに製造時期は厳寒の一月のみに製造し、伊吹おろしの肌さす厳寒の中、まさしく雪の華が舞い降りる中で作り込みました。その粘りのある質感、火立ちのよい、柔らかな熱感と、何より黄金色に艶やかに光る色合い、風合い、品格ともに今までにない最高級点灸用もぐさ「雪の華」です。

去る六月十日、十二日の三日間、第五十四回全日本鍼灸学会が、海の都福岡にて盛大に開催されました。開催テーマは『「医の真髄」のもと講演、シンポジウム、セミナー等を通じて、医・医療の原点とは何かを問い直し、今後の鍼灸学の進むべき道について積極的な意見交換が行われました。』



会場風景



山正のブース

今回も山正は開催主旨に賛同し、協賛・展示を行いました。(山正は全日本鍼灸学会には三十余年以上出展を続けています。)
山正展示ブースではたくさんの治療家・学生方に来て頂き大変賑わいました。
主な展示内容は、長生灸・つぼ灸NEO・長安NEO・最上級点灸用もぐさ「雪の華」・NEOデイスポ鍼・シリコン製テーピング・NEOシリコンバンテージ(参考出展)などです。
その中で最も治療家の方より関心の高かった製品が、特撰日本一黄金山「雪の華」です。「従来の製品とは明らかに品質が違う」「ひねった瞬間に違いがわかる」「今回出展しているもぐさメーカーの中で、最高の御評価を頂きました。等々、最高の御評価を頂きました。
学生の方からは「NEOデイスポ鍼」に関心が集まりました。「ワンタッチ式は非常に使いやすい」「発想が画期的」「施術時、片手挿管時に鍼が落下しないのは良い」といったご意見を頂戴しました。
今後は山正はこういった学会・展示会に積極的に協賛・参加を続けることで、お客様からの「生」の声を大事にし、新しい製品開発に反映できるよう取り組んでいきます。

フリーダイヤルFAX 開設のご案内

この度、山正本社ではフリーダイヤルFAXを開設いたしました。ご注文の際はぜひご利用ください。

FAX番号: 0120-06-3909

なお、ご利用いただいております

フリーダイヤル: 0120-47-0330
は勝手ながら使用できなくなりました。

何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

ソフトな温感で
上品な治療を!

200社
1000社
長生灸シルバー

120回分
630回分

つぼ灸NEO

- 片手で取って
- 片手で押し出し
- 片手で貼り付け

東京営業所移転のお知らせ

二月十五日より、左記のとおり移転し営業しております。

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1
吉祥寺永谷シティプラザ917号室
電話番号 0422(2)37881
FAX番号 0422(2)37882

山正が皆様にお届けしておりますNEOディスポ鍼(1P&4P)は昨年4月 独自のワンタッチ方式と数々の工夫を凝らし発売いたしました。この1年間でご使用いただいております皆様から、いろいろなお声を頂戴いたしました。そのご指導ご教授いただきました内容を織り込み、この4月 進化したNEOディスポ鍼をリニューアルリリースいたしました。改良されたNEOディスポ鍼をお試しいただきたくよろしくお願い申し上げます。なお、ここに至るまでに、お声を頂戴いたしました治療家の方々、リニューアルまでの欠品でご迷惑をおかけしたにもかかわらず発売をお待ち頂きました先生方に紙面をかりまして感謝申し上げます。今後ますますNEOディスポ鍼に磨きをかけて参ります。なお、サンプルご希望の際には、お取引の医療器販売店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

進化 エヴォリューション **NEOディスポ鍼** リニューアル リリース **Revolution** 革命 レヴォリューション

改良を加え、リニューアルされたNEOディスポ鍼

今までのNEOディスポ鍼


改良NEOディスポ鍼は独自のワンタッチ方式を更に進化!

NEOディスポ鍼は独自のワンタッチ方式採用



ストッパー部分と鍼管部を一体成形し、ストッパーの外れや亀裂の問題を完全に解消しました。

今まではストッパー部分と鍼管部分が2つより構成され、ストッパー部分が外れる、ストッパー部分の亀裂などの問題がありました。

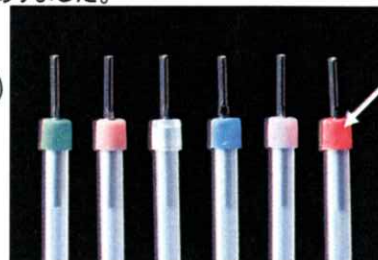


改良 進化1

改良NEOディスポ鍼は鍼管全体をカラー化し、さらに色識別しやすく改良しました

ディスポ鍼初!! 無痛鍼管タイプ採用 R形状カット+太径化

鍼管の両サイドをRカット

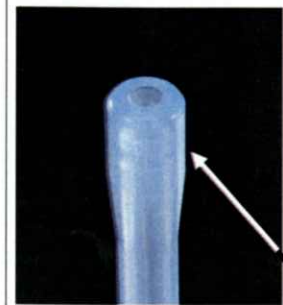

鍼管先端部拡大

改良 進化2

鍼管先をR形状にカットするだけでなく、無痛鍼管タイプを採用。鍼管先端は従来品より接皮面積を多くすることで、患者様に余分な痛みを与えない。ディスポ鍼初の無痛鍼管タイプの鍼管を採用しました。

患部に最初に触れる部分の鍼管の先端を優しくR形状にカットしていました。




当社従来の鍼管先端R形状

進化3

カシメ方法も更に進化

進化4

カラーで太さを更にわかりやすく。

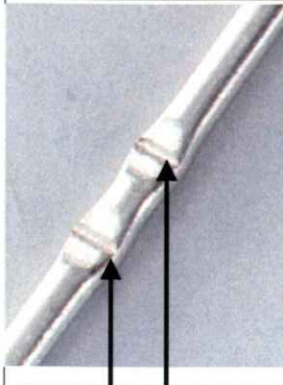

従来のカシメは面で止めるカシメ方法でした。

改良

面によるカシメはそのまま。更に線(溝)でも止めるカシメ方法を採用。引張強度を更に確保しました。

面と線(溝)で止める2重カシメを採用

従来品は1Pはストッパーの色で番手識別できましたが、4Pは全サイズ透明鍼管で識別できませんでした。

改良

1P 4P共に鍼管をカラー鍼管にしました。これで4Pも色による番手確認が容易になりました。また、パッケージも1Pと4Pの色を変える事で、一目で1Pと4Pの区別ができるように改良しました。



その他

- ①鍼柄先端完全密封 ②点字シール
- ③鍼先の松葉型は従来どおりです。

今後も使用される先生方、患者様のお声をいただき、製品の改良に努力いたします。新しくなったNEOディスポ鍼。是非お試しください。